

Jumper Medical JPD-HA121

Manuál

Obsah balení

Tlakoměr, rukáv, propojovací hadička, cestovní obal, manuál, 4× AA baterie.

Popis zařízení

Hadička vedoucí od rukávu se připojuje do konektoru na levém boku zařízení.

Pod displejem se nacházejí tři ovládací tlačítka – přepínání mezi uživateli, funkční tlačítko, tlačítko pro přístup do paměti.

Nabíjení

Zařízení standardně funguje s pomocí čtyř AA baterií. Alternativně lze využít microUSB konektor umístěný na pravém boku.

Přepínání mezi uživateli

Zařízení nemusíte zapínat pro přepnutí mezi uživatelem A a B. Stačí krátce stisknout pravé ovládací tlačítko.

Nastavení data a času


Ve zhasnutém stavu dlouze podržte tlačítko pro přepínání uživatelů. Krátkým stiskem následně přepínáte mezi hodnotami, stiskem pravého tlačítka je nastavujete.

Pokyny k měření

Doporučujeme 30 minut před měřením vynechat větší množství jídla, kofeinu nebo cvičení.

Zkontrolujte, zda je hadička vedoucí od rukávu spolehlivě připojena k zařízení.

Rukáv tlakoměru musí být v přímém kontaktu s kůží. Nelze měřit přes oblečení.

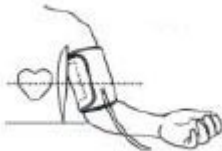

Rukáv
tlakoměru
bezpečně
upevněte
kolem
paže

(ideálně použijte levou paži), nad loket. Ruku opřete o pevný povrch, viz obrázek.

Měření začne po stisknutí zapínacího tlačítka na tlakoměru.



Po ukončení měření se rukáv automaticky vyfoukne a zobrazí se naměřené hodnoty (systolický a diastolický tlak a pulz), viz obrázek.

Historie záznamů

Zařízení dokáže uchovávat 99 záznamů pro dvě různé osoby. Při dalším měření jsou nejstarší záznamy automaticky přepsány. Pro smazání paměti otevřete pravým tlačítkem historii měření a pravé tlačítko dlouze podržte.

Propojení s mobilní aplikací

Spusťte aplikaci JumperHealth a sekci s měřením tlaku. Spusťte na tlakoměru měření tlaku. Zařízení se mezi sebou propojí. Propojení funguje na základě Bluetooth. V záložce Historie můžete vidět historii měření.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2021

Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.

Jumper Medical JPD-HA121

Manuál

Obsah balenia

Tlakomer, objímka, spojovacia hadica, cestovné balenie, ručné, 4× AA batérie.

Popis zariadenia

Trubica objímky sa pripája ku konektoru na ľavej strane zariadenia.

Pod displejom sú tri ovládacie tlačidlá – prepínanie medzi používateľmi, funkčné tlačidlo, tlačidlo prístupu do pamäte.

Nabíjanie

V predvolenom nastavení zariadenie pracuje so štyrmi batériami veľkosti AA. Prípadne je možné použiť konektor microUSB umiestnený na pravej strane.

Prepínanie medzi používateľmi

Ak chcete prepínať medzi používateľmi A a B, nemusíte zapnúť zariadenie.

Nastavenie dátumu a času


V stave vypnutia dlho podržte tlačidlo prepínača používateľa. Potom krátko prepínajte medzi hodnotami a stlačením pravého tlačidla ich nastavte.

Pokyny na meranie

Odporúčame vynechať viac jedla, kofeínu alebo cvičenia 30 minút pred meraním.

Skontrolujte, či je hadica od puzdra k rukávu spoľahlivo pripojená k zariadeniu.

Objímka tlakomeru musí byť v priamom kontakte s pokožkou. Nedá sa merať cez oblečenie.

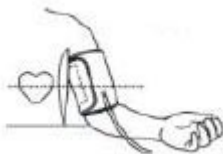

Bezpečne
upevnite
objímku
tlakomeru
okolo
ramena (v

ideálnom prípade použite ľavé rameno) nad lakťom.

Posadíte ruku na pevný povrch, pozri obrázok.

Meranie sa začne stlačením tlačidla napájania na tlakomere.



Na konci merania sa objímka automaticky vyfúkne a zobrazia sa namerané hodnoty (systolický a diastolický tlak a pulz), pozri obrázok.

História záznamov

Zariadenie môže uložiť 99 záznamov pre dvoch rôznych ľudí. Pri ďalšom zmeraní sa najstaršie záznamy automaticky prepíšu. Ak chcete vymazať pamäť, kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte históriu meraní a dlho podržte pravé tlačidlo.

Pripojenie k mobilnej aplikácii

Otvorte JumperHealth a sekciu merania tlaku. Spustíte meranie tlaku na tlakomere. Zariadenie sa navzájom spája. Odkaz funguje na základe bluetooth. Na karte História sa zobrazí história meraní.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok spolu s bežným odpadom, ale odovzdujte ho na recykláciu do zberného miesta elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode

Dovozca, Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno),
prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky
smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Úplné znenie vyhlásenia o zhode si môžete
stiahnuť <http://www.satomar.cz>. Copyright ©

2021 Satomar, s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia. Chyby tlače vyhradené.

Najaktuálnejšiu verzii [príručky najdete na
www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).

Jumper Medical JPD-HA121

Manual

Contents of the package

Pressure gauge, sleeve, connecting hose, travel packaging, manual, 4× AA batteries.

Description of the device

The sleeve tube connects to the connector on the left side of the device.

Below the display there are three control buttons – switching between users, functional button, memory access button.

Charging

By default, the device works with four AA batteries. Alternatively, a microUSB connector located on the right side can be used.

Switch between users

You don't need to turn on the device to switch between user A and B. Just briefly press the right control button.

Set a date and time


In the off state, hold down the user switch button for a long time. You then briefly switch between values, pressing the right button to set them.

Measurement instructions

We recommend skipping more food, caffeine or exercise 30 minutes before measuring.

Check that the sleeve-to-sleeve hose is reliably connected to the device.

The sleeve of the pressure gauge must be in direct contact with the skin. Can't be measured through clothes.

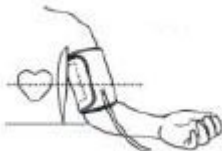

Securely
fasten the
sleeve of
the
pressure
gauge

around the arm (ideally use your left arm), above the elbow. Rest your hand on a solid surface, see figure.

The measurement begins when the power button on the pressure gauge is pressed.



At the end of the measurement, the sleeve is automatically blown out and the measured values (systolic and diastolic pressure and pulse) are displayed, see figure.

History of records

The device can store 99 records for two different people. The next time you measure, the oldest records are automatically overwritten. To erase memory, right-click

to open the measurement history and hold the right button for a long time.

Connect to a mobile app

Open JumperHealth and the pressure measurement section. Start pressure measurement on the pressure gauge. The device connects with each other. The link works on the basis of Bluetooth. In the History tab, you can see the measurement history.

Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. In order to protect the environment, do not dispose of the product with ordinary waste, but hand it over for recycling to a collection point of electrical waste.

Declaration of conformity

The importer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno), declares that the product meets all the essential requirements of eu directives that apply to it.

 The full text of the Declaration of Conformity can be downloaded <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. All rights reserved.

Appearance and specifications may be changed without notice. Print errors reserved.

The most up-to-date version of the manual can always be found www.mobilnipodpora.cz.

Jumper Medical JPD-HA121

Manuell

Inhalt des Pakets

Manometer, Hülse, Verbindungsschlauch,
Reiseverpackung, manuell, 4× AA-Batterien.

Beschreibung des Geräts

Das Hülsenrohr wird mit dem Stecker auf der linken Seite des Geräts verbunden.

Unterhalb des Displays befinden sich drei Steuertasten – Umschalten zwischen Benutzern, Funktionstaste, Speicherzugriffstaste.

Laden

Standardmäßig arbeitet das Gerät mit vier AA-Batterien. Alternativ kann ein microUSB-Anschluss auf der rechten Seite verwendet werden.

Wechseln zwischen Benutzern

Sie müssen das Gerät nicht einschalten, um zwischen Benutzer A und B zu wechseln. Drücken Sie einfach die rechte Steuertaste.

Festlegen eines Datums und einer Uhrzeit

Halten Sie im Aus-Zustand die Benutzerschaltertaste für eine lange Zeit gedrückt. Anschließend wechseln Sie kurz


zwischen den Werten und drücken die rechte Taste, um sie einzustellen.

Messanleitung

Wir empfehlen, mehr Essen, Koffein oder Bewegung 30 Minuten vor der Messung zu überspringen.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch mit hülsenförmigem Ärmel zuverlässig mit dem Gerät verbunden ist.

Die Hülse des Manometers muss in direktem Kontakt mit der Haut sein. Kann nicht durch Kleidung gemessen werden.

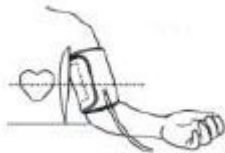

Befestigen Sie die Hülse des Manometers um den Arm (idealerweise verwenden Sie Ihren linken Arm) über dem Ellenbogen. Ruhen Sie Ihre Hand auf einer festen Oberfläche, siehe Abbildung.

Die Messung beginnt, wenn der Ein-/Ausschalter am Manometer gedrückt wird.



Am Ende der Messung wird die Hülse automatisch ausgeblasen und die Messwerte (systolischer und diastolischer Druck und Puls) angezeigt, siehe Abbildung.

Geschichte der Aufzeichnungen

Das Gerät kann 99 Datensätze für zwei verschiedene Personen speichern. Wenn Sie das nächste Mal messen, werden die ältesten Datensätze automatisch überschrieben. Um den Speicher zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Messverlauf zu öffnen und die rechte Taste für eine lange Zeit gedrückt zu halten.

Herstellen einer Verbindung mit einer mobilen App

Open JumperHealth und den Druckmessabschnitt. Beginnen Sie die Druckmessung am Manometer. Das Gerät verbindet sich miteinander. Der Link funktioniert auf der Basis von Bluetooth. Auf der Registerkarte Verlauf können Sie den Messverlauf anzeigen.

Zur verfügung



Das Produkt enthält Batterien und/oder recycelbaren Elektroschrott. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht mit gewöhnlichen Abfällen, sondern übergeben Sie es zur Verwertung an eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Konformitätserklärung

Der Einführer, Satomar s.r.o(Karlova 37, 614 00 Brunn), erklärt, dass das Produkt alle wesentlichen Anforderungen der eu-Richtlinien erfüllt, die für sie gelten.



Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann <http://www.satomar.cz> heruntergeladen werden. Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. Alle Rechte vorbehalten.

Aussehen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler reserviert.

Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie immer www.mobilnipo.cz.

Jumper Medical JPD-HA121

Kézi

A csomag tartalma

Nyomásmérő, hüvely, csatlakozó tömlő, utazási csomagolás, kézi, 4× AA akkumulátorok.

A készülék leírása

A hüvelycső a készülék bal oldalán található csatlakozóhoz csatlakozik.

A kijelző alatt három vezérlőgomb található – váltás a felhasználók között, funkcionális gomb, memóriaelérési gomb.

Töltés

Alapértelmezés szerint a készülék négy AA akkumulátorral működik. Alternatív megoldásként a jobb oldalon található microUSB csatlakozó is használható.

Váltás a felhasználók között

Az A és B felhasználó közötti váltáshoz nem kell bekapcsolni az eszközt. Csak röviden nyomja meg a jobb vezérlőgombot.

Dátum és idő beállítása

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a felhasználó kapcsológombját hosszú ideig. Ezután röviden válthat az


értékek között, és a jobb gombbal be kell állítania azokat.

Mérési utasítások

Javasoljuk, hogy a mérés előtt 30 perccel hagyja ki az ételt, a koffeint vagy a testmozgást.

Ellenőrizze, hogy a hüvelytől a hüvelyhez tömlő megbízhatóan csatlakozik-e a készülékhez.

A nyomásmérő hüvelyének közvetlenül érintkeznie kell a bőrrel. Nem lehet ruhákon keresztül mérni.

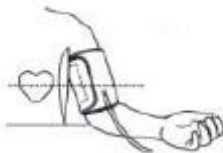

Rögzítse biztonságosan a kar körüli nyomásmérő hüvelyét (ideális esetben használja a bal karját) a könyök fölé. Pihentesd a kezed egy szilárd felületre, lásd az ábrát.

A mérés akkor kezdődik, amikor megnyomja a nyomásmérő bekapcsológombját.



A mérés végén a hüvely automatikusan kifújódik, és megjelennek a mért értékek (szisztolés és diasztolés nyomás és impulzus), lásd az ábrát.

[A nyilvántartások története](#)

Az eszköz 99 rekordot tárolhat két különböző ember számára. A következő méréskor a rendszer automatikusan felülírja a legrégebbi

rekordokat. A memória törléséhez kattintson a jobb gombbal a mérési előzmények megnyitásához, és tartsa lenyomva a megfelelő gombot hosszú ideig.

Csatlakozás mobilalkalmazáshoz

Nyissa meg a JumperHealth-t és a nyomásmérési szakaszt. Indítsa el a nyomásmérést a nyomásmérőn. Az eszköz csatlakozik egymáshoz. A kapcsolat Bluetooth alapján működik. Az Előzmények lapon láthatja a mérési előzményeket.

Ártalmatlanítás



A termék akkumulátorokat és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a terméket közönséges hulladékkal, hanem adja át újrahasznosításra az elektromos hulladék gyűjtőpontra.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az importőr, a Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) kijelenti, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.



A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető <http://www.satomar.cz>. Szerzői ©

2021 Satomar, s. r. o. Minden jog fenntartva.

A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Fenntartott nyomtatási hibák.

A kézikönyv legfrissebb verziója mindig megtalálható [awww.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).